


FICHE TECHNIQUE PATIENT

ITC R EDGE AI 24 (PREMIUM+) ●●●●●

ITC R EDGE AI 20 (PREMIUM) ●●●●


ITC R EDGE AI 16 (AVANÇÉE) ●●●

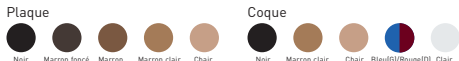

ITC R EDGE AI Intra-conduit Rechargeable



LPP Classe II

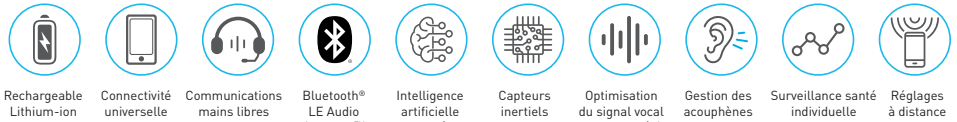

DESCRIPTION

Intra-conduit connecté rechargeable, discret et confortable. Réalisé sur-mesure, cet intra-auriculaire se loge dans le conduit auditif. Il peut être adapté pour les pertes auditives allant de moyennes à sévères. Technologie sans-fil 2,4 GHz basée sur la plateforme Neuro Processeur Starkey avec une optimisation du DNN (réseau de neurones profond), pour offrir une meilleure qualité sonore, faciliter l'écoute et améliorer la parole dans le bruit.

APPLICATIONS INTELLIGENTES



My Starkey
pour les utilisateurs



HearShare
pour les aidants

Cette application très conviviale, vous propose de multiples fonctions efficaces, faciles à utiliser, pour vous aider à surveiller votre santé et accéder à des informations utiles.

Vous partagez des informations utiles telles que votre activité physique, l'utilisation de vos aides auditives ou vos interactions sociales avec les personnes de votre choix.

IMPORTANT : Ces applications permettent de connecter facilement vos appareils Apple ou Android à vos aides auditives connectées. Cependant certains appareils peuvent ne pas fonctionner efficacement dû à leur version. C'est pourquoi nous vous conseillons avant d'acquiescer vos aides auditives, de vérifier que votre smartphone et/ou vos autres appareils actuels soient compatibles avec ces aides auditives auprès de votre audioprothésiste ou sur notre site www.starkey.fr. Et pour obtenir une réponse instantanée, flashez ce QR Code avec votre smartphone !



Performances	GAMME TECHNOLOGIQUE	PREMIUM+	PREMIUM	AVANÇÉE	AVANTAGES
Technologie Neuro Processeur G2	Canaux de réglages Bandes de compression	24/24	20/20	16/16	Niveau technologique très performant. Doté de 20 canaux et 20 bandes réglables par l'audioprothésiste pour une haute résolution sonore, offrant de bonnes performances dans toutes sortes d'environnements.
	Autonomie de la batterie streaming : sans/avec	42 heures 36 heures	42 heures 36 heures	42 heures 36 heures	L'autonomie peut varier en fonction de l'utilisation des fonctionnalités sans-fil. Fonctionne avec le chargeur Premium (avec batterie intégrée) StarLink 2.0 ou le chargeur StarLink 2.0 (sans batterie intégrée) qui se branche sur secteur.
	Indice de protection	IP68+	IP68+	IP68+	Le premier chiffre correspond au degré de protection maximale contre la poussière et les salissures. Le second chiffre au degré de protection contre l'eau. L'aide auditive bénéficie en plus de 8 points de protection supplémentaire pour une durabilité accrue.
Options	Contrôles utilisateurs	●	●	●	Peut-être équipé d'un bouton-poussoir multifonction permettant de régler le volume et de changer les programmes.
Performances auditives	Luminosité des consonnes	● Maximum	● Minimum	● Minimum	Cette fonction permet d'améliorer la clarté de la parole.
	Voice AI	●	●	●	Votre iPhone est utilisé comme microphone à distance et grâce à la puissance de l'intelligence artificielle, vous bénéficiez d'une amélioration du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans le bruit.
Technologie Neuro Sound 2.0	Mode Edge+ adaptatif Optimisation du signal vocal en temps réel	●●●● Automatique Personnalisation App	●● Personnalisation App	● App	Vous bénéficiez d'une optimisation du signal vocal pour mieux comprendre la parole dans les environnements difficiles (ex. transport, restaurant) grâce à l'intelligence artificielle. Le Mode Edge+ scanne l'environnement sonore et ajuste l'amplification selon vos besoins et agit sur demande chaque fois que vous en avez besoin.
	Streaming direct audio via le Bluetooth®	●	●	●	Vous pouvez recevoir des appels, écouter de la musique dans vos aides auditives avec votre smartphone, tablette et autres appareils audio ; et profiter de vos programmes TV préférés grâce à un accessoire sans-fil.
	Audio bidirectionnel Communications mains libres	●	●	●	Les microphones des aides auditives captent et transmettent votre voix directement vers l'iPhone et l'iPad ¹ , vous permettant de converser simplement en mains libres.
	Directionnel Microphones directionnels (en option)	●●●●	●●	●	Optimise les performances pour un confort d'écoute dans les environnements venant de toutes les directions.
Directionnel Microphones directionnels (en option)	Adaptatif	●●●●	●●	●	Localise précisément la source sonore et améliore la compréhension de la parole dans les environnements sonores difficiles.
	Dynamique	●	●	●	
	Amélioration spatiale de la parole	●●●●	●●	●	Permet de redécouvrir la musique grâce à un traitement de signal dédié.
	Traitements de musique	●●●●	●●	●	
Sound Manager (Gestionnaire de sons) Algorithmes de traitement du son	Réducteur de bruit	●●●●	●●	●	Réduction du bruit basée sur le DNN. Fonctionne en parallèle avec le gestionnaire de sons. Garantit une bonne qualité sonore, une facilité d'écoute, une intelligibilité de la parole dans les environnements bruyants.
	Calme	●●●●	●●	●	Analyse et s'adapte à de multiples environnements sonores simultanément. Grâce à ce gestionnaire de sons, vous entendrez des sons doux sans bruit, vous distinguerez des mots et des conversations de manière plus intuitive en réduisant grandement l'effort d'écoute.
	Bruits mécaniques	●●●●	●●	●	
	Parole dans le bruit	●●●●	●●	●	
	Bruits transitoires	●●●●	●●	●	
Vent	●●●●	●●	●		
Autres fonctions avancées	Tinnitus Multiflex Gestion des acouphènes	●●●●	●●	●	Offre une très grande flexibilité pour créer un stimulus sonore agréable, personnalisable et ajustable qui soulage efficacement les acouphènes (sifflements, bourdonnements...)
	Annulateur de Larsen	●●●●	●●	●	Système pro-actif de gestion des Larsens qui les anticipe et qui peut être personnalisé selon votre mode de vie.
	Duplication fréquentielle	●	●	●	Optimise l'audibilité en temps réel en identifiant les indices vocaux aigus et en les dupliquant dans les basses fréquences.

Fonctions télésanté et fonctions pratiques

TeleHear Réglages à distance		Sur votre demande, votre audioprothésiste effectue des réglages à distance, sans avoir à prendre rendez-vous ni à vous déplacer.
Engagement & Suivi d'activité		Suivi de l'activité physique et de l'engagement social pour atteindre des objectifs santé.
Détection et alertes en cas de chute		Détection d'une chute et envoi d'un message d'alerte à des contacts prédéfinis. NOUVEAU Évaluation de l'équilibre via des exercices autoguidés.
Rappels intelligents		Programmation de rappels tels que des rendez-vous, prises de médicaments et autres activités personnelles.
Auto On/Off		Préservation de l'énergie de vos aides auditives lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
Double tap		Coupage du son d'un accessoire en tapotant 2 fois sur votre oreille.
Self Check		Test diagnostique des composants de vos aides auditives.

Fonctions intelligentes

Traduction		
Transcription audio-texte		
Assistant intelligent		
Trouver mes aides auditives		

Accessoires sans-fil

Connectivité avec des smartphones et toutes autres sources media Apple ou Android pour recevoir les appels, la musique, le son de la télévision directement dans vos aides auditives.	
Accessoires StarLink Émetteur TV StarLink Edge Télécommande 2.0	Apple Watch Montre connectée servant d'interface pour votre iPhone Possibilité d'activer le Mode Edge+, de changer de programme et de régler le volume.

- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation de nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 5 ans à partir de la date d'achat.
- Toutes les pièces détachées indispensables à l'utilisation des accessoires StarLink fonctionnant avec nos solutions auditives, sont disponibles au minimum pendant 2 ans à partir de la date d'achat.

¹ Compatible avec les appareils iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max et modèles ultérieurs, ainsi qu'avec les appareils iPad Pro 12,9 pouces (5e génération), iPad Pro 11 pouces (3e génération), iPad Air (4e génération) et iPad (6e génération).